


# 吸入服薬情報提供書（エリクラ）

おくすりの名前	吸入回数
エリクラ 【ジェヌエア】	1日2回 1回1吸入

## 《部位の名称》

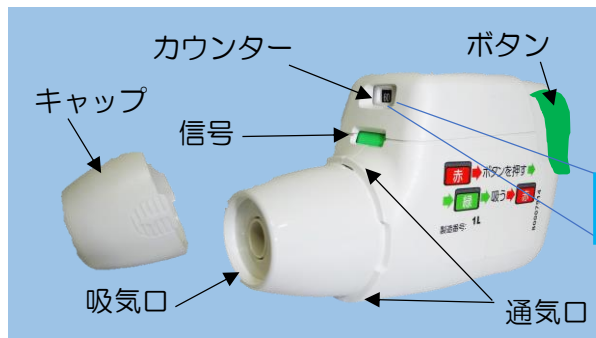

## 《残薬の確認方法》

- ボタンを押すたびにカウンターが少しずつ左に動き10回刻みで減る
- カウンターが0になった回の吸入が終了しましたら次回からは新しい吸入器を使用して下さい
- カウンターが0になるとロックがかかりボタンは押せなくなります

## 《吸入映像》※1

（毎日の操作）



（約1分40秒）

（注意点）



（約50秒）

\*あなたのウィークポイントにチェック回していますので参考にしてください。

手順		ポイント	
① 薬剤の準備	<input type="checkbox"/> 薬剤セット時の操作はボタンを上にして水平に持ち行う <input type="checkbox"/> カウンターで残量確認する <input type="checkbox"/> キャップを外す（両端をつまみ引っ張る）（A） <input type="checkbox"/> 信号が赤になっていることを確認する（B） <input type="checkbox"/> ボタンを下までしっかりと押して離す（C） <input type="checkbox"/> 信号が赤から緑に変わったことを確認する（D）		<ul style="list-style-type: none"> <li>• 水平に持ち、しっかり操作しないと正確な1回分量がセットされない</li> </ul>
② 息吐き	<input type="checkbox"/> 無理のない程度に息を吐き一旦止める （吸入口には息を吹きかけない）		<ul style="list-style-type: none"> <li>• 息吐きをしないとしっかり吸えない</li> </ul>
③ 吸入	<input type="checkbox"/> 吸入口をくわえ、口角を閉じ、強く深く、最後まで息を吸い込む （通気口をふさがない） * 正しく吸入できると、カチッと音がして、信号が緑色から赤色へ戻るが、音がしても最後まで息を吸いきる		<ul style="list-style-type: none"> <li>• 息がもれないように口角を閉じる</li> <li>• 掃除機でかき集めるイメージで吸う</li> <li>• 緑から赤に変わらないときは薬が吸えていないので、ボタンを押さずに、もう一度吸入する</li> </ul>
④ 息止め	<input type="checkbox"/> 吸入器から口を離し、口を閉じ、指折り5つ息を止める （無理のない程度で良い）		<ul style="list-style-type: none"> <li>• 肺により多くの薬を定着させるため</li> </ul>
⑤ 息吐き	<input type="checkbox"/> 鼻からゆっくりと息を吐く		<ul style="list-style-type: none"> <li>• 口から吐くと速くなることもある</li> </ul>
⑥ 後片付け	<input type="checkbox"/> キャップをしっかりと閉じる		<ul style="list-style-type: none"> <li>• キャップを閉じる前に吸入口を拭く</li> <li>• アクチュエーターを週1回洗浄する</li> </ul>
⑦ うがい	<input type="checkbox"/> 吸入後はガラガラうがい、ブクブクうがいを各3回ずつ行う		<ul style="list-style-type: none"> <li>• 口腔内及び咽頭についた薬を洗い流す</li> </ul>

※1 患者吸入指導テキスト(大林浩幸著、協和企画)より著者の許可を得て使用

きちんと吸入し、発作や息切れの悪化を予防しましょう！

保険調剤薬局名（薬剤師名）： \_\_\_\_\_ 年 \_\_\_\_\_ 月 \_\_\_\_\_ 日