


吸入服薬情報提供書 (pMDI(エアゾール製剤)+マウスピーススパーサー)【エアロチャンバー】

おくすりの名前	吸入回数
【エアゾール製剤】	1日____回 1回____吸入

《部位の名称》

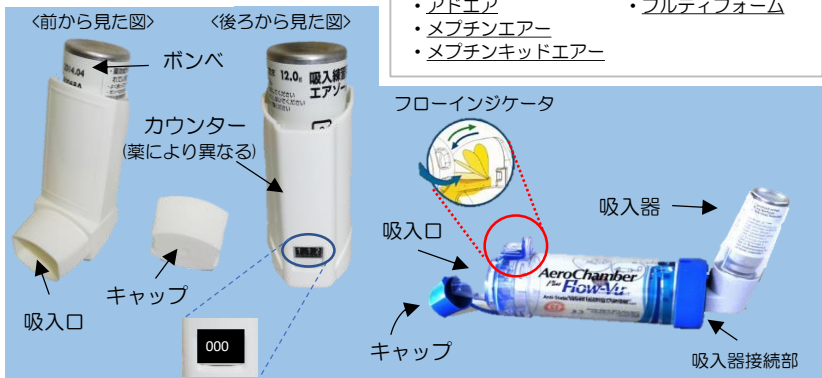

- | | |
|------------|-----------|
| カウンター付き製品 | 目盛り付き製品 |
| ・アドエア | ・フルティフォーム |
| ・メフチンエア | |
| ・メフチンキッドエア | |

《残薬の確認方法》

- ・ポンペを押すたびにカウンターが減る
- ・カウンターが0になった回の吸入が終わりでしたら、次回からは新しい吸入器を使用して下さい
- ・カウンターの無いものは専用の残量計又は残数確認シールで確認できる

《吸入映像》※1 (毎日の操作)



(約3分40秒)

*あなたのウイークポイントにチェック回していますので参考にしてください。

手順		ポイント	
① 薬剤の準備	<ul style="list-style-type: none"> ■ 開封時は、試し噴霧を()回行う □ 薬剤セット時の操作はポンペの底が上になるように垂直に持ち行う □ カウンターで残量確認する(カウンター付のもの) □ スパーサーと吸入器のキャップを外す □ 吸入器をよく振る(A) □ ポンペの底が上になるように垂直にスパーサー(フロートインジケータが上)へ取り付ける(B) 		<ul style="list-style-type: none"> ・垂直に持ち操作しないと正確な1回分量がセットされない
② 息吐き	<ul style="list-style-type: none"> □ 無理のない程度に息を吐き一旦止める(スパーサーの吸入口には息を吹きかけない) 		<ul style="list-style-type: none"> ・息吐きをしないとしっかり吸えない
③ 吸入	<ul style="list-style-type: none"> □ スパーサーの吸入口をくわえ、ポンペを1回押し薬剤を噴霧後、口角を閉じ、3秒間ほどかけて、ゆっくり深く、最後まで息を吸い込む □ 息止めができない場合は、5回程度(15秒程度)安静呼吸を行う。(②④⑤は不要) 		<ul style="list-style-type: none"> ・深呼吸するイメージで吸う ・1回の吸入ごとに1回噴霧する ・吸入に合わせ、フロートインジケータが動いていることを確認します
④ 息止め	<ul style="list-style-type: none"> □ 吸入器から口を離し、口を閉じ、指折り5つ息を止める(無理のない程度で良い) 		<ul style="list-style-type: none"> ・肺により多くの薬を定着させるため
⑤ 息吐き	<ul style="list-style-type: none"> □ 鼻からゆっくりと息を吐く 		<ul style="list-style-type: none"> ・口から吐くと速くなることがある
繰返し	*複数回吸入する場合は①~⑤を繰り返す		
⑥ 後片付け	<ul style="list-style-type: none"> □ 吸入器をスパーサーから外し、吸入器およびスパーサーのキャップをしっかり閉じる 		<ul style="list-style-type: none"> ・キャップを閉じる前に吸入口を拭く ・1週間に1度程度スパーサーを洗浄して下さい。
⑦ うがい	<ul style="list-style-type: none"> □ 吸入後はガラガラうがい、ブクブクうがいを各3回ずつ行う 		<ul style="list-style-type: none"> ・口腔内及び咽頭についた薬を洗い流す

※1 患者吸入指導テキスト(大林浩幸著、協和企画)より著者の許可を得て使用

きちんと吸入し、発作や息切れの悪化を予防しましょう！

保険調剤薬局名(薬剤師名) : _____ 年 月 日