


おくすりの名前	吸入回数
【エアゾール製剤】	1日____回 1回____吸入

《部位の名称》

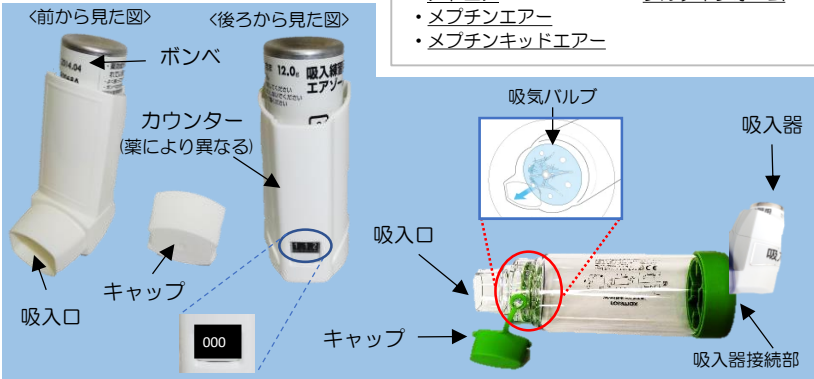

- カウンター付き製品 目盛り付き製品
- ・アドエア
 - ・メフチンエア
 - ・メフチンキッドエア
 - ・フルティフォーム

《残薬の確認方法》

- ・ボンベを押すたびにカウンターが減る
- ・カウンターが0になった回の吸入が終わりましたら、次回からは新しい吸入器を使用して下さい
- ・カウンターの無いものは専用の残量計又は残数確認シールで確認できる

*あなたのウイークポイントにチェック回していますので参考にしてください。

<p>・主薬と噴霧ガスを均一にするため吸入器を振りますが、患者の混乱を防ぐため振る必要のないものも全て振ると統一する</p>		
① 薬剤の準備	<p>■ 開封時は、試し噴霧を2回行い、 □ 薬剤セット時の操作はボンベの底が上になるように垂直に持ち行う □ カウンターで残量確認する(カウンター付のもの) □ スパーサーと吸入器のキャップを外す □ 吸入器をよく振る (A) □ ボンベの底が上になるように垂直にスパーサーに</p>	<p>A よく振る</p> <p>B 垂直に持ち操作しないと正確な1回分量がカットされない</p>
<p>・息吐きと吸入をそれぞれしっかりしていただくために、息吐き後一旦息を止め吸入する</p>		
② 息吐き	<p>□ 無理のない程度に息を吐き一旦止める (スパーサーの吸入口には息を吹きかけない)</p>	<p>吐 呼気量 > 吸気量</p> <p>・息吐きをしないとしっかり吸えない</p>
③ 吸入	<p>□ スパーサーの吸入口をくわえ、ボンベを1回押し薬剤を噴霧後、口角を閉じ、3秒間ほどかけて、ゆっくり深く、最後まで息を吸い込む □ 息止めができない場合は、5回程度(15秒程度)安静呼吸を行う。(②④⑤は不要)</p>	<p>吸 深呼吸するイメージで吸う 1回の吸入ごとに1回噴霧する 吸入に合わせ、吸気バルブが動いていることを確認する</p>
④ 息止め	<p>□ 深くとは「長く吸う」と解釈する ・トレーナー(笛)使用時は、安定した音が長く続くように指導する 速すぎると音が止まる設計となっている ・「深呼吸をする」イメージ・速さで吸い、肺の奥まで届けると説明すると伝わりやすい</p>	<p>多くの薬を定着させるため</p>
⑤ 息吐き	<p>□ 鼻からゆっくりと息を吐く</p>	<p>吐 口から吐くと速くなることがある</p>
⑥ 後片付け	<p>□ 吸入器をスパーサーから外し、吸入器およびスパーサーのキャップをしっかり閉じる</p> <p>スパーサーの取り扱いはメーカーの説明書に従う</p>	<p> キャップを閉じる前に吸入口を拭く</p>
⑦ うがい	<p>□ 吸入後はガラガラうがい、ブクブクうがいを各3回ずつ行う</p>	<p>ガラガラ ブクブク 口腔内及び咽頭についた薬を洗い流す</p>

吸入ステロイドは口腔内カンジダや嗄声などの副作用を防止するため、吸入後すぐにうがいをする
それ以外の吸入薬も統一化を図るため、うがいを行うようにする

保険調剤薬局名(薬剤師名) : _____ 年 月 日